

# SLS 安全标签系统™



AT 系统管理工具软件



**CODONICS**

# SLS 安全标签系统™

AT 系统管理工具软件允许药剂师创建并控制为 SLS 安全标签系统所使用的处方，以保证药物安全和系统使用的安全保护，该产品可以使临床药剂师成为手术室医生团队中的一个重要的成员。

## AT 系统管理工具软件

### 简介

美国科多尼克 (Codonics) 的安全标签系统 (SLS500i) 源自它独有的专利创新技术，成为一套保障药品安全使用、检查合规性，并提供药品可追溯性的完整一体化方案。它可以通过在手术室以及任何需要准备针筒的地点使用标准合规的彩色数码标签，来改进医院手术室药品注射器使用过程，进而达到改善病人安全的效果。该系统中的科多尼克安全标签 AT 系统管理工具使医院药房能够：


- 创建一个符合国际医疗机构委员会 (JCI) 要求，美国麻醉协会 (ASA) 标准，和 ISO 体系关于标签指导标准的药品处方。
- 自定义可供 SLS 使用的药品处方，例如：选择一个符合美国麻醉协会药品分类定义的标签打印模板。
- 在任何一台 SLS 上控制发布处方和设置数据包。
- 根据实时接收反馈信息来监控每一台安全标签系统的工作状态。
- 据用户现场实际和特定的需求设置 SLS500i 系统。
- 在任何一台 SLS 系统上装载已批准的处方，该处方是经准备和管理员定义，验证，并确认安全使用的药品，增加了病人的用药安全。

SLS 系统中包含了近一年内 Lexicomp 基本药品数据库。用户可以导入该 Lexicomp 数据库，导入自定义的数据库，或者是手工添加药品信息来完成 AT 上的主药品数据库 (MDD) 的药品数据添加。



通过网络实时接收关于每一台 SLS 关键性事件的 email 通知\* 例如“药品无法找到”、“药品已验证”和“药品没有被批准，请勿使用”等等。

### SLS 主药品数据库模块

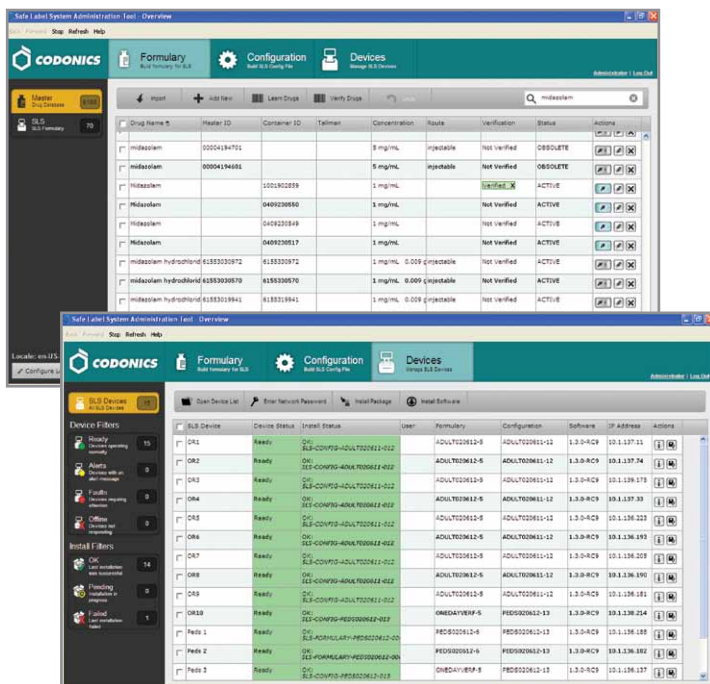

### SLS AT 设备管理模块

AT 系统管理工具软件最低运行配置要求：

- 硬件：Intel Core 2 Duo 处理器，2GB 内存，CD ROM 驱动器，USB 接口，打印机 (选配)
- 操作系统：Window XP 或更高版本
- 软件：Java 6 更新23 或更高版本，仅32 位  
Internet Explorer 8 或更高版本  
Excel 或其他可以打开报告的兼容性软件

条码扫描枪 (选配)：根据扫描的条码类型，选择一维或二维的手握式或固定式扫描枪\*  
必须配置成模型模式  
必须配置成报告 AIM 编码模式  
设置与本地条码对应的编码方式

\*Email 提醒模式为选配项  
\*\*在采购 Codonics AT 附件配置中可以包含二维码扫描枪组件。



麻醉后监测治疗室



捐赠赞助商



合作伙伴

所有注册的商标都属于各自相关的业主，本公司有权在不发布通知的情况下修改产品的参数表。正在申请美国专利中。  
本彩页于中国印制，版权所有 © 2010-2012 Codonics Inc. 8/2012



We bring the future into focus

地址：上海市长宁区仙霞路317号  
远东国际大厦B栋1412室  
邮编：200051  
电话：+86 13918872504  
电邮：info@codonics.com  
网站：www.codonics.com.cn  
服务热线：800-820-8635



ISO 9001/ISO 13485  
CERTIFIED COMPANY

请速与我们联系，或访问我们的网站 [www.codonics.com.cn](http://www.codonics.com.cn)